

アーメドクリアパス

Ahmed ClearPath[®] 250 & 350

アーメドからバルブレス緑内障治療用インプラント

モデル CP350

ウイング状のデザインは直筋の付着部を避け、直筋の下に配置した際の安定性を高めます

モデル CP250

単一象限のインプラントとしてより小型に設計され、直筋の間に収まるため外眼筋を操作する必要がありません

柔軟な素材

インプラントが目の形状に自然にフィットします

リップコード


予めチューブに糸（4-0ポリプロピレン）が通されています
必要に応じ、移植前に容易に取り外しが可能です

前方のスーチャーホール

縫合ポイントが前方に配置され、インプラントを固定する際の制御とアクセスが容易です

23ゲージニードル

チューブ挿入用の穿刺創を作成するための針を同梱しています

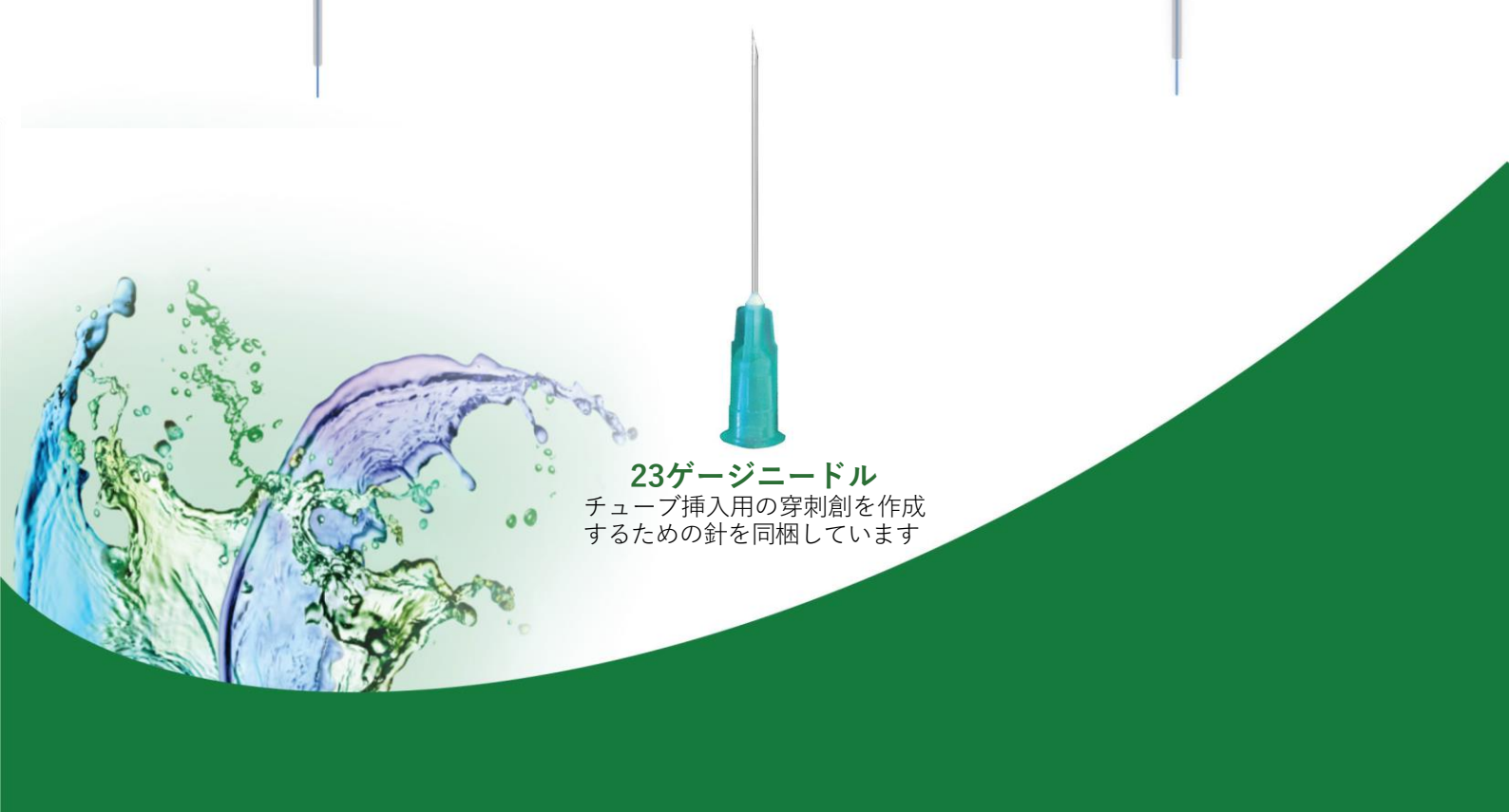

仕様

タイプ	モデル CP350	モデル CP250
	バルブレス	
表面積	350 mm ²	250 mm ²
プレート長	16.48 mm	16.70 mm
プレート幅	30.47 mm	18.47 mm
プレート厚	0.81 mm	0.81 mm
チューブ長	32 mm	32 mm
開窓数	4	4
材質	シリコーン（硫酸バリウム含有）※	

※ 超音波の分解能、CTスキャン、MRIおよび頭蓋単純撮影による識別性を向上させるため、プレートにバリウムを含浸させています。

ニューワールド・メディカル社（New World Medical, Inc.）の使命は、人類に役立つイノベーションを提供することにより、視力を維持・向上させることです。

私たちは、世界中の緑内障患者の苦痛を軽減することを目的とした最先端の医療機器を開発し、商品化することに努めています。

ご使用に際して

- ・日本緑内障学会のガイドラインを遵守して下さい。
- ・添付文書にて手術に伴う合併症等を含む使用の際の注意事項をご確認下さい。
- ・適正にご使用いただく為、事前にビデオ等で本品の操作に関する技能等の確認をお願い致します。

* 仕様及び形状は予告なく変更することがあります

医療機器承認番号 30600BZX00020000

製造販売元



ジャパン フォーカス株式会社

本社 / 〒113-0033 東京都文京区本郷4-37-18 (IROHA-JFCビル)
☎03(3815)2611
大阪 / 〒541-0053 大阪府中央区本町4-6-7 (本町スクウェアビル)
☎06(6262)1099
URL: <https://www.japanfocus.co.jp>

総発売元

株式会社 JFCセールスプラン

本社 / 〒113-0033 東京都文京区本郷4-3-4 ☎03(5684)8531 (代)
大阪 ☎06(6271)3341 名古屋 ☎052(932)2201 福岡 ☎092(414)7360
URL: <https://www.jfcsp.co.jp>